



# Suturas

Ancladén

stoma®  
Pasión por la perfección



Suturas Quirúrgicas Ancladén	111
No Absorbibles	112
Absorbibles	114
Listado de referencias y precios	116
Suturas Quirúrgicas DemeTECH	117
Suturas Quirúrgicas Stoma	117

## Ancladén


Apostamos por los **profesionales**



## Tipos de agujas

Tipo de aguja	Punta	Cuerpo	Símbolo
Cilíndrica			●
Cilíndrica <b>Fuerte</b>			●
Cilíndrica <b>Punta Trokar</b>			⊕
Triangular			▼
Triangular <b>Micropunta</b>			▽

## Curvaturas de las agujas

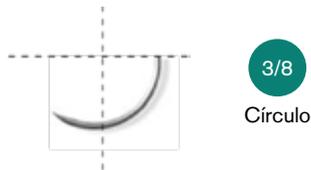

## Materiales de sutura



**AnclaSilk**  
Sutura de Seda



**AnclaVert**  
Sutura de Poliéster



**AnclaLon**  
Sutura de Nylon



**AnclaLene**  
Sutura de Polipropileno



**AnclaPGA RAPID**  
Sutura de Ácido Poliglicólico

**AnclaPGS**  
Sutura de Ácido Poliglicólico



**AnclaSorb**  
Sutura de Policaprolactona

**AnclaSorbB**  
Sutura de Policaprolactona

**AnclaSorbLT**  
Sutura de Polidioxanona

## AnclaSilk

### Sutura de Seda



#### **Sutura natural, no absorbible de Seda negra trenzada.**

Fabricada a base de hilos de Fibroina, proteína del gusano de Seda Bombix mori L, trenzados. Posteriormente las fibras son recubiertas, para reducir la capilaridad y el efecto de sierra propio de los multifilamentos. El resultado es una Sutura siempre cómoda y fácil de manejar.

- Muy buena manejabilidad
- Excelente anudabilidad y seguridad en el nudo

## AnclaVert

### Sutura de Poliéster



#### **Sutura no absorbible de Poliéster verde trenzado, recubierto.**

Fabricada a base de fibras de PoliÉtilenTereftalato recubiertas. Material muy resistente e inerte. Constituye una alternativa a la seda, ofreciendo una superior resistencia y tolerancia por parte del organismo.

- Elevada resistencia a la tracción
- Suavidad de paso a través de los tejidos

## AnclaLon

### Sutura de Nylon



#### **Sutura no absorbible de Nylon monofilamento azul.**

Sutura monofilar fabricada a base de CoPoliamida 6-6/6. El carácter no capilar del monofilamento, le confiere una extraordinaria inercia biológica, prácticamente sin reacción tisular. Muy adecuado para trabajar con los calibres más finos.

- Material muy flexible y sin efecto memoria
- Excelente tolerancia tisular

## AnclaLene

### Sutura de Polipropileno



#### **Sutura no absorbible de Polipropileno monofilamento azul.**

Monofilamento fabricado a base de Polipropileno, de superficie muy suave y atraumática. Total inercia química y excelentes propiedades mecánicas. Es un material elástico que recupera después de una elongación.

- Óptima manejabilidad y seguridad en el nudo
- Notable resistencia a la tracción

Aguja	Calibre	AnclaSilk	AnclaVert	AnclaLon	AnclaLene
Cilíndrica, 1/2 círculo 	HR22 3/0	15105			
Cilíndrica <b>Fuerte</b> , 1/2 círculo 	HRB22 4/0	15205	16205		
Cilíndrica, 1/2 círculo <b>Punta Trokar - Premium</b> 	HRT17 4/0		16310	17305	
	HRT26 3/0	15312	16316		
Cilíndrica, 3/8 círculo <b>Punta Trokar - Premium</b> 	DRT12 6/0			17415	
	5/0			17420	
Triangular, 1/2 círculo <b>Premium</b> 	HS20 4/0	15532	16517		
	3/0	15535	16518		
Triangular, 3/8 círculo <b>Premium</b> 	DS16 5/0	15650	16630	17625	
	4/0	15655	16635	17630	
	4/0	15658			
	DS19 3/0	15660	16640	17635	
	2/0	15665			
Triangular, 3/8 círculo <b>Micropunta</b> 	DSM10 7/0			17740	
	DSM11 6/0			17745	19730
	6/0			17748	19735
	DSM13 5/0			17750	19740
	6/0			17760	19750
	DSM16 5/0			17765	19755
	4/0			17770	19760

Cajas de 24 unidades.

Longitud: 70 cm. (Excepto 7/0: 45 cm/12 unid.)

€ Ver precios en página 116

### AnclaPGA<sup>RAPID</sup>

#### Sutura de Ácido Poliglicólico



**Sutura sintética absorbible de Ácido Poliglicólico de absorción rápida. Trenzada, recubierta. Incolora.**

Material de elevada resistencia a la tracción que se reabsorbe por hidrólisis. Sutura de absorción rápida. La pérdida de la mitad de su resistencia se produce al cabo de 7 días. La reabsorción total tiene lugar al cabo de 42 días.

- Excelente manejabilidad y cómoda manipulación
- Suavidad de paso y seguridad en el nudo

### AnclaPGS

#### Sutura de Ácido Poliglicólico



**Sutura sintética absorbible de Ácido Poliglicólico, de absorción lenta. Trenzada, recubierta. Violeta.**

La pérdida de la mitad de su resistencia se produce 15 días después de su implantación. La hidrólisis total tiene lugar en un plazo de unos 3 meses.

- Deslizamiento suave y atraumático
- Seguridad en el anudado

### AnclaSorb

#### Sutura de Policaprolactona

### AnclaSorbB

#### Sutura de Policaprolactona



**Sutura sintética absorbible (PoliGlicolideCaprolactona) monofilamento. Violeta (AnclaSorb). Incolora (AnclaSorbB).**

Sutura monofilar de Polímero de Poly (Glicolide-E-Caprolactona). Violeta. Material de elevada resistencia a la tracción, de absorción rápida. Transcurridos 7 días, la sutura conserva el 50 % de su resistencia inicial. La hidrólisis total no tiene lugar antes de 60 días de su implantación.

- Suavidad en su manejo
- Anudado resistente y seguro

### AnclaSorbLT

#### Sutura de Polidioxanona



**Sutura sintética absorbible (Polidioxanona) monofilamento. Violeta.**

Sutura monofilar de Polidioxanona. Material de elevada resistencia a la tracción, con periodo de absorción regular y prolongada. Transcurridos 50 días, la sutura aún conserva el 50 % de su resistencia inicial. La hidrólisis total no tiene lugar antes de 6 meses de su implantación.

- Elevada resistencia a la tracción
- Mínima reacción tisular



Aguja	Calibre	AnclaPGARAPID Incoloro	AnclaPGS Violeta	AnclaSorb Violeta	AnclaSorbB Incoloro	AnclaSorbLT Violeta
Cilíndrica, 1/2 círculo						
 HRB22	4/0	12205				
Cilíndrica, 1/2 círculo <b>Punta Trokar - Premium</b>						
 HRT17	4/0	12303		18305		
Triangular, 3/8 círculo <b>Premium</b>						
 DS16	5/0	12604		18625	14623	
	4/0	12605		18630	14624	
 DS19	3/0	12610				
Espatulada doble, 3/8 círculo <b>Micropunta</b>						
 2 x DLM 20-6	8/0		13630			
Triangular, 3/8 círculo <b>Micropunta</b>						
 DSM24-8	7/0		13702			13730
 DSM10	7/0		13700			
 DSM11	6/0	12710	13705	18745	14737	
 DSM13	6/0	12714		18748		
	5/0	12715		18750	14740	
 DSM16	6/0			18765		
	5/0		13725	18770		
	4/0			18775		

**Cajas de 24 unidades.**

Longitud: 70 cm. (Excepto 7/0: 45 cm/12 unid.)

€ Ver precios en página 116

## No Absorbibles

### AnclaSilk

Ref.	Aguja	Cal.	cm.	U/C	€ Caja
15105	HR22	3/0	70	24	45 €
15205	HRB22	4/0	70	24	74 €
15312	HRT26	3/0	70	24	92 €
15532	HS20	4/0	70	24	49 €
15535	HS20	3/0	70	24	49 €
15650	DS16	5/0	70	24	70 €
15655	DS16	4/0	70	24	56 €
15658	DS19	4/0	70	24	56 €
15660	DS19	3/0	70	24	45 €
15665	DS19	2/0	70	24	45 €

### AnclaVert

Ref.	Aguja	Cal.	cm.	U/C	€ Caja
16205	HRB22	4/0	70	24	82 €
16310	HRT17	4/0	70	24	82 €
16316	HRT26	3/0	70	24	82 €
16517	HS20	4/0	70	24	66 €
16518	HS20	3/0	70	24	66 €
16630	DS16	5/0	70	24	66 €
16635	DS16	4/0	70	24	66 €
16640	DS19	3/0	70	24	66 €

### AnclaLon

Ref.	Aguja	Cal.	cm.	U/C	€ Caja
17305	HRT17	4/0	70	24	86 €
17420	DRT12	5/0	70	24	86 €
17625	DS16	5/0	70	24	86 €
17630	DS16	4/0	70	24	86 €
17635	DS19	3/0	70	24	86 €
17740	DSM10	7/0	45	12	115 €
17745	DSM11	6/0	70	24	108 €
17748	DSM13	6/0	70	24	108 €
17750	DSM13	5/0	70	24	108 €
17760	DSM16	6/0	70	24	108 €
17765	DSM16	5/0	70	24	108 €
17770	DSM16	4/0	70	24	108 €

### AnclaLene

Ref.	Aguja	Cal.	cm.	U/C	€ Caja
19730	DSM11	6/0	70	24	124 €
19735	DSM13	6/0	70	24	124 €
19740	DSM13	5/0	70	24	124 €
19750	DSM16	6/0	70	24	124 €
19755	DSM16	5/0	70	24	124 €
19760	DSM16	4/0	70	24	124 €

## Absorbibles

### AnclaPGARAPID Incoloro

Ref.	Aguja	Cal.	cm.	U/C	€ Caja
12205	HRB22	4/0	70	24	149 €
12303	HRT17	4/0	70	24	159 €
12604	DS16	5/0	70	24	119 €
12605	DS16	4/0	70	24	119 €
12610	DS19	3/0	70	24	119 €
12710	DSM11	6/0	70	24	231 €
12714	DSM13	6/0	70	24	231 €
12715	DSM13	5/0	70	24	231 €

### AnclaPGS Violeta

Ref.	Aguja	Cal.	cm.	U/C	€ Caja
13630	2DLM20-6	8/0	30	12	244 €
13702	DSM24-8	7/0	45	12	156 €
13700	DSM10	7/0	45	12	142 €
13705	DSM11	6/0	70	24	231 €
13725	DSM16	5/0	70	24	231 €

### AnclaSorb Violeta

Ref.	Aguja	Cal.	cm.	U/C	€ Caja
18305	HRT17	4/0	70	24	210 €
18625	DS16	5/0	70	24	119 €
18630	DS16	4/0	70	24	119 €
18745	DSM11	6/0	70	24	231 €
18748	DSM13	6/0	70	24	231 €
18750	DSM13	5/0	70	24	231 €
18765	DSM16	6/0	70	24	231 €
18770	DSM16	5/0	70	24	231 €
18775	DSM16	4/0	70	24	231 €

### AnclaSorbB Incoloro

Ref.	Aguja	Cal.	cm.	U/C	€ Caja
14623	DS16	5/0	70	24	119 €
14624	DS16	4/0	70	24	119 €
14737	DSM11	6/0	70	24	231 €
14740	DSM13	5/0	70	24	231 €

### AnclaSorbLT Violeta

Ref.	Aguja	Cal.	cm.	U/C	€ Caja
13730	DSM24-8	7/0	30	12	188 €

## Cajas de 24 unidades.

Longitud: 70 cm. (Excepto 7/0: 45 cm/12 unid.  
Excepto 8/0: 30 cm/12 unid.)

## Deme Silk

Seda negra trenzada

Ref.	Aguja	L. Aguja (mm)	Cal.	L. Hilo (mm)	Precio € C/12 ud.
SK2640	DS19	19	4/0	75	22 €
SK2630	DS19	19	3/0	75	22 €



## DemeLon Multi

Nylon multifilamento negro, trenzado recubierto

Sutura no absorbible a base de Poliamida 6-6/6. Multifilamento trenzado negro recubierto de una vaina del mismo material. (**Supramid**). Mínima reacción tisular, buena anudabilidad y excelente resistencia a la tracción.

Ref.	Aguja	L. Aguja (mm)	Cal.	L. Hilo (mm)	Precio € C/12 ud.
NM1165	DS16	16	5/0	70	26 €
NM1164	DS19	19	4/0	70	24 €
NM1163	DS19	19	3/0	70	24 €



# Suturas Quirúrgicas

## Suturas Stoma PTFE black

Sutura, **no absorbible, monofilamento**, fabricada a base de PolitetraFluorEtileno expandido.

Es una sutura **muy manejable, elástica, de color blanco**.

**Las agujas** son de color negro, de ahí el nombre black. Son de **1/2 círculo, cuerpo cilíndrico** aplanado y punta especial.

Poco traumáticas y con muy buena capacidad de punción

Ref.	Aguja	L. Aguja (mm)	Cal.	L. Hilo (mm)	Precio € C/12 ud.
4116.63	HOT13	13	6/0	55	170 €
4125.63	HOT16	16	5/0	55	170 €
4123.63	HOT16	16	3/0	55	170 €

