
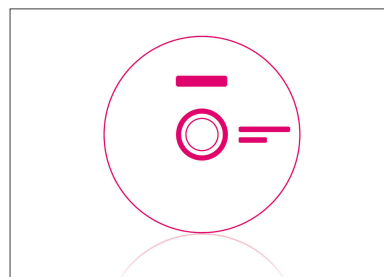
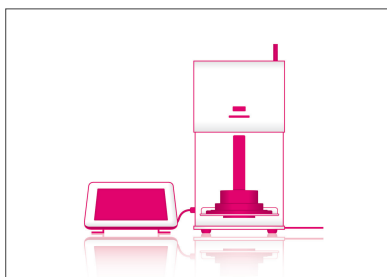
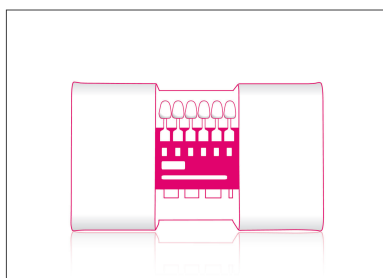


Compendio VITA Febrero 2021

Fijación

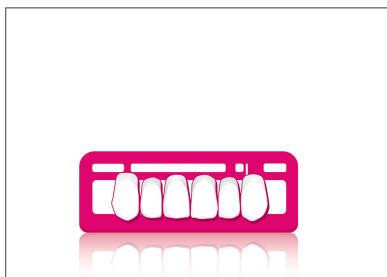

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

El sistema de fijación totalmente adhesivo con componentes perfectamente armonizados para el acondicionamiento de la sustancia dental y del material de restauración



Descripción del producto

El sistema de fijación totalmente adhesivo con componentes perfectamente armonizados para el acondicionamiento de la sustancia dental y del material de restauración.

Están indicadas para la fijación de todas las restauraciones indirectas de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, dióxido de circonio, composite y metal.

Ventajas

- Fijación fiable de múltiples materiales de restauración mediante agentes adhesivos adaptados específicamente a cada material.
- Proceso de fijación seguro gracias al kit de fijación bien estructurado con componentes dispuestos sistemáticamente e identificados cromáticamente.
- Gracias al práctico kit de dos piezas en formato de bandeja normalizada, todos los componentes están siempre a mano.

Contenido

VITA ADIVA® TOOTH-ETCH

Es un gel de grabado de ácido fosfórico al 37% para el grabado del esmalte dental para la fijación adhesiva de restauraciones a la sustancia dental natural. Indicado para las técnicas "total etch" y "selective etch".

VITA ADIVA® T-BOND I+II

Es un sistema adhesivo de fraguado dual. VITA ADIVA T-BOND posibilita una buena unión entre el composite de fijación y el esmalte grabado o la dentina.

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Es un gel de ácido fluorhídrico al 5% para el grabado de restauraciones de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, a fin de obtener un anclaje micromecánico entre la restauración y el composite de fijación. ¡Solo para uso extraoral!

VITA ADIVA® C-PRIME

Es un agente adhesivo que establece una unión química entre restauraciones de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida y el composite de fijación.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Es un agente adhesivo que establece una unión química entre restauraciones de dióxido de circonio sinterizadas y el composite de fijación.

VITA ADIVA® M-PRIME

Es un agente adhesivo que establece una unión química entre restauraciones arenadas de titanio, aleaciones de metales no nobles, aleaciones de metales nobles y el composite de fijación.

VITA ADIVA® F-CEM

Es un composite de fijación de fraguado dual completamente adhesivo utilizado para la fijación definitiva de restauraciones de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, dióxido de circonio, composite y metal.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Es un gel de glicerina incoloro para evitar la capa de inhibición de oxígeno durante la fijación adhesiva. También puede utilizarse como pasta de prueba (try-in).

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE Surtidos**VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET****VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET
FAFAS**

Cantidad	Contenido	Material
1	5 ml	VITA ADIVA F-CEM A2 Universal
1	3 ml	VITA ADIVA OXY-PREVENT
2	para CERA ETCH	n desechables verdes, rojas
1	3 ml	VITA ADIVA TOOTH-ETCH
1	para TOOTH	n de un solo uso azul
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND I
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND II
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING VERSIONS

VITA ADIVA F-CEM, 5 ml

Denominación	Ref. 5 ml
A2 Universal	FAFCEMA25
A3	FAFCEMA35
Translucent	FAFCEMT5
White opaque	FAFCEMW05

VITA ADIVA® COMPONENTS

Denominación	Ref.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml gel de ácido fluorhídrico al 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml gel de ácido fluorhídrico al 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Primer para cerámica	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Primer para metal	FAMP5
VITA ADIVA OXY-PREVENT, 3 ml Gel de protección de oxígeno	FAOP3
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Sistema Adhesivo de fraguado dual	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) gel de ácido fosfórico al 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Primer para dióxido de circonio	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Denominación	Ref.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE

El sistema de fijación autoadhesivo con componentes perfectamente armonizados para el acondicionamiento del material de restauración



Descripción del producto

El sistema de fijación autoadhesivo con componentes perfectamente armonizados para el acondicionamiento del material de restauración.

Están indicadas para la fijación de todas las restauraciones indirectas de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, dióxido de circonio, composite y metal.

Ventajas

- Fijación fiable de múltiples materiales de restauración mediante agentes adhesivos adaptados específicamente a cada material.
- Proceso de fijación seguro gracias al kit de fijación bien estructurado con componentes dispuestos sistemáticamente e identificados cromáticamente.
- Gracias al práctico kit de dos piezas en formato de bandeja normalizada, todos los componentes están siempre a mano.

Contenido

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Es un gel de ácido fluorhídrico al 5 % para el grabado de restauraciones de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, a fin de obtener un anclaje micromecánico entre la restauración y el composite de fijación. ¡Solo para uso extraoral!

VITA ADIVA® C-PRIME

Es un agente adhesivo que establece una unión química entre restauraciones de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida y el composite de fijación.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Es un agente adhesivo que establece una unión química entre restauraciones de dióxido de circonio sinterizadas y el composite de fijación.

VITA ADIVA® M-PRIME

Es un agente adhesivo que establece una unión química entre restauraciones arenadas de titanio, aleaciones de metales no nobles, aleaciones de metales nobles y el composite de fijación.

VITA ADIVA® S-CEM

Es un composite de fijación de fraguado dual autoadhesivo utilizado para la fijación definitiva de restauraciones de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, dióxido de circonio, composite y metal.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Es un gel de glicerina incoloro para evitar la capa de inhibición de oxígeno durante la fijación adhesiva. También puede utilizarse como pasta de prueba (try-in).

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE Surtidos

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET

**VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET
FASAS**

Cantidad	Contenido	Material
1	5 ml	VITA ADIVA S-CEM A2 Universal
1	3 ml	VITA ADIVA OXY-PREVENT
2	para CERA ETCH	n desechables verdes, rojas
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 4:1

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING VERSIONS

VITA ADIVA S-CEM, 5 ml

Denominación	Ref. 5 ml
A2 Universal	FASCEMA25
Translucent	FASCENT5

VITA ADIVA® COMPONENTS

Denominación	Ref.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml gel de ácido fluorhídrico al 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml gel de ácido fluorhídrico al 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Primer para cerámica	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Primer para metal	FAMP5
VITA ADIVA OXY-PREVENT, 3 ml Gel de protección de oxígeno	FAOP3
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Sistema Adhesivo de fraguado dual	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) gel de ácido fosfórico al 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Primer para dióxido de circonio	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Denominación	Ref.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® TE-CEM



Descripción del producto

VITA ADIVA TE-CEM es un cemento de resina de polimerización dual para la fijación provisional.

Está disponible en el color Translucent.

VITA ADIVA® TE-CEM Productos**VITA ADIVA® TE-CEM**

VITA ADIVA TE-CEM, 5 ml

Denominación	Ref. 5 ml
Translucent	FATECEM5

VITA ADIVA® IA-CEM

Solución de fijación ultraopaca para restauraciones implantosoportadas



Descripción del producto

VITA ADIVA IA-CEM es un composite de fijación ultraopaco con efecto enmascarador intenso y de fraguado dual para prótesis implantosoportadas.

Se utiliza para la fijación adhesiva definitiva de coronas (sobre pilar) y mesoestructuras a bases adhesivas de titanio y a pilares individuales de titanio y de dióxido de circonio.

El composite de fijación se complementa con agentes adhesivos adaptados específicamente a cada material, para obtener una unión resistente entre la restauración y el pilar.


VITA ADIVA® IA-CEM Surtidos**VITA ADIVA® IA-CEM****VITA ADIVA® IA-CEM SET****VITA ADIVA® IA-CEM SET****FAIACEMSET**

Cantidad	Contenido	Material
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays

VITA ADIVA® IA-CEM Productos**VITA ADIVA® IA-CEM**

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Denominación	Ref. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05

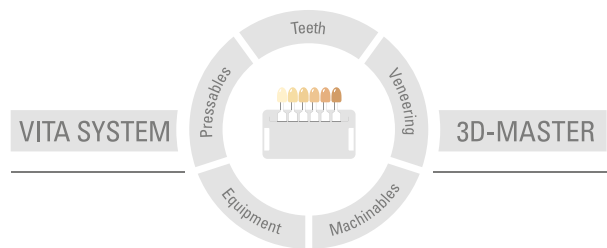

Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 02.2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik